

# STARWIND

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Стационарный ирригатор  
для полости рта

SOI930

# СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности.....	3
Специальные меры безопасности.....	4
Назначение .....	5
Область применения.....	5
Схема устройства.....	6
Технические характеристики.....	6
Комплектация .....	7
Подготовка к работе .....	7
Эксплуатация .....	8
• Установка насадки.....	8
• Режимы давления.....	9
• Использование.....	9
• Кнопка остановки подачи воды.....	10
Уход и очистка .....	11
Правила и условия монтажа.....	11
Транспортировка и хранение .....	11
Реализация устройства .....	12
Условия утилизации.....	12
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	12
Гарантийные обязательства .....	13

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки STARWIND. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации ирригатора, а также по уходу за ним.

# ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.**

- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не помещайте посторонние предметы внутрь устройства.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений, до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля питания использование устройства запрещено. При его повреждении замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица, ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих элементов не является гарантийным случаем.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В случае, если недавно была перенесена периодонтальная или стоматологическая операция, а также при прохождении курса лечения ротовой полости, не рекомендуется использование ирригатора без предварительной консультации с врачом.
- Если во время использования вы заметили кровоточивость десен, необходимо прекратить использование продукта до консультации с врачом.
- Использовать ирригатор необходимо только по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в данной инструкции.
- Строго соблюдайте все рекомендации по сборке прибора. Во избежание поражения электрическим током, не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не включайте прибор в случае если резервуар для воды пуст.
- Обязательно выливайте из резервуара всю оставшуюся воду после использования прибора.
- Не допускайте падение ирригатора и не подвергайте его ударам.
- Используйте только предлагаемые производителем комплектующие.
- Во избежание образования известкового налета на стенках резервуара и на внутренних частях прибора, необходимо использовать дистиллированную воду и регулярно проводить его очистку.
- Не рекомендуется использовать прибор при наличии ран и/или стоматитов в полости рта.

- Не используйте прибор, если вы носите какие-либо предметы или украшения на губах или зубах. Удалите их до использования прибора.
- Не допускается добавление химических компонентов, соды, зубной пасты, растворов трав и прочих жидкостей кроме воды или специальных растворов для полоскания.
- Клапан резервуара является герметичным только при установке на корпус ирригатора. Поэтому рекомендуется наливать воду в резервуар, уже установленный на корпусе.
- Не допуская попадания струи на электрические части (поворотную ручку и регулятор давления).

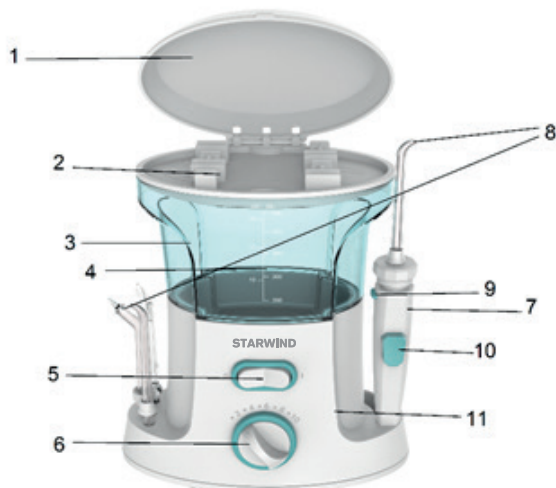
## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство является электроприбором, предназначенным исключительно для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных промежутков и массажа дёсен за счёт пульсаций водяной струи.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в домашних зонах и может применяться в квартирах, загородных домах или других бытовых условиях непромышленной эксплуатации в соответствии с мерами безопасности и назначением, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением инструкции по эксплуатации, в этом случае, производитель не несет ответственности за возможные последствия.

# СХЕМА УСТРОЙСТВА



1. Крышка резервуара для воды
2. Отсек для ранения насадок
3. Резервуар для воды
4. Шкала уровня воды
5. Кнопка вкл./выкл.
6. Регулятор давления воды
7. Ручка ирригатора
8. Сменные насадки
9. Кнопка фиксации насадки
10. Кнопка остановки подачи воды
11. Корпус устройства

*Примечание: Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 18 Вт
- Номинальное напряжение: 100-240 В; ~50/60 Гц
- Частота пульсации: 1250-1700 имп/мин  $\pm$  20%
- Давление воды: 1-8 бар
- Расчетное давление струи: 80-680 кПа  $\pm$  20%
- Время полного расхода воды из резервуара: 90-120 сек
- Водонепроницаемый корпус
- Уровень защиты от влаги - IPX 4
- Отсек для насадок
- Настольное размещение
- Плавное управление
- Импульсный принцип подачи струи воды
- Количество режимов давления: 10
- Количество насадок: 7
- Вращающиеся насадки на 360°
- Объем резервуара для воды: 600 мл
- Длина кабеля: 1 м
- Размер устройства: 178 x 114 x 215 мм
- Вес нетто: 770 г
- Класс защиты от поражения электрическим током: III

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ирригатор – 1 шт.
- Сменные насадки – 7 шт.
- Резервуар для воды – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

*Примечание: После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.*

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем.
3. Убедитесь в том, что все элементы и сам прибор не повреждены.
4. Полностью размотайте электрошнур питания.
5. Корпус прибора (11) протрите влажной тканью. Тщательно просушите прибор перед включением в сеть электропитания.
6. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
7. Заполните резервуар для воды (3). Для залива воды аккуратно откройте крышку резервуара (1) и залейте воду в резервуар (рис. 1). Наполнить резервуар можно также предварительно сняв его с корпуса.

*Примечание: Перед первым использованием рекомендуется прогнать через прибор полный резервуар воды на холостом ходу.*

8. После заполнения резервуара водой, зафиксируйте его на корпусе прибора и плотно закройте крышку (рис. 2).

*Примечание: Объем залитой воды не должен превышать 600 мл. Рекомендуется использовать воду не выше 40-45 °С.*

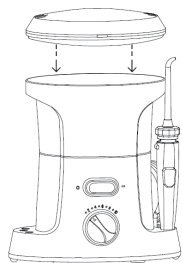


Рис. 1

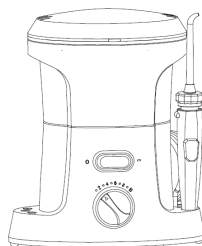


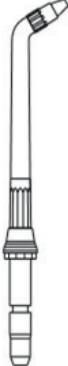




Рис. 2

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Установка насадки

В комплект входит 7 сменных насадок для полной гигиены полости рта:

				
3 Стандартные насадки для общей гигиены полости рта	Пародонтальная насадка с резиновым наконечником применяется для промывания чувствительных участков десен.	Насадка для ирригации труднодоступных мест, а также при использовании брекетов.	Специальная насадка для деликатного очищения полости рта.	Насадка для чистки языка
Предмет гигиены полости рта наряду с зубными щетками, пастами, флоссами, бальзамами и другими профилактическими средствами.	Используется для чистки над линией десны, под углом 45°, аккуратными движениями, начиная с минимального уровня давления.	Специальная насадка предназначена для одновременной чистки и полоскания труднодоступных областей вокруг брекетов. Маленькая щеточка проникает в труднодоступные участки и удаляет остатки пищи и бактерии.	Для деликатного очищения имплантов, мостов, коронок. Рекомендуется для деликатной гигиены полости рта.	Установите насадку, начиная с середины языка, аккуратно начните чистку. Рекомендуется использовать на минимальном режиме давления воды.

Выберите нужную насадку (8) и вставьте её в гнездо для насадок на ручке ирригатора (7) до характерного щелчка, при этом гнездо насадки опустится, и насадка будет зафиксирована (рис. 1).

Чтобы извлечь насадку, нажмите на кнопку фиксации насадки (9) на ручке ирригатора. После нажатия гнездо насадки приподнимется с характерным щелчком. Потяните насадку вверх (рис. 2).



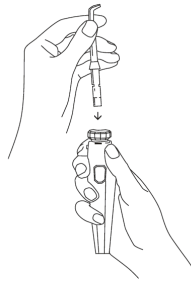


Рис. 1

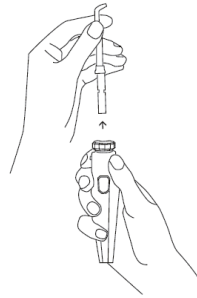


Рис. 2

### **Внимание!**

**Снятие насадки производится только после нажатия кнопки фиксации насадки.**

### **Режимы давления**

Для управления уровнем давления поверните регулятор давления воды (6) на минимум.

При первом использовании устройства рекомендуется начинать с минимального уровня.

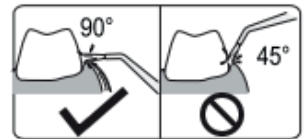
По мере использования постепенно увеличивайте давление в соответствии с вашими предпочтениями.

**Переключение режимов давления возможно при выключенном устройстве.**

### **Использование**

*Примечание: Во время использования рекомендуется находиться перед раковиной, а во избежание разбрызгивания рекомендуется включать прибор только когда он находится во рту.*

1. Перед включением ирригатора наклоните его струйным наконечником насадки к себе под углом 90°.



*Примечание: При использовании пародонтальной насадки, угол наклона должен быть 45°. Несоблюдение такого метода ирригации может вызвать эрозию десны.*

2. Установите минимальный режим давления с помощью регулятора.
3. Поместите насадку в полость рта и включите прибор, переведя кнопку вкл./выкл. (5) в положение «вкл».
4. Далее с помощью регулятора установите необходимый уровень давления воды и начните процедуру ирригации. Плавными движениями пройдите по всей полости рта от жевательных зубов к передним.

## **Внимание!**

- Если вода не пошла сразу, причиной может быть воздушная пробка.
  - Для её удаления поместите насадку в полость рта, включите прибор и втяните в себя воздух из насадки до того момента, пока не поступит вода.
5. После завершения использования, выключите ирригатор, нажав на кнопку вкл./выкл.

*Примечание: Если во время использования в резервуар был залит специальный раствор для полости рта, обязательно промойте резервуар после использования, для этого достаточно наполнить резервуар 100-150 мл воды, во избежание засоров и образования осадка в насосе, и слить остатки воды. При необходимости повторите несколько раз.*

6. Отсоедините насадку, предварительно нажав кнопку фиксации насадок, и слейте остатки жидкости из резервуара для воды.
7. Аккуратно откройте крышку резервуара и слейте остатки воды.

## **Кнопка остановки подачи воды**

На ручке ирригатора есть кнопка остановки подачи воды (10), она служит для экстренной остановки потока жидкости в случае болевых ощущений.

Эта кнопка является гидравлической, поэтому во избежание быстрого износа не следует каждый раз использовать ее перед включением или выключением ирригатора.



При остановке воды с помощью данной кнопки на максимальном режиме давления в насосе ирригатора создается избыточное давление. Чтобы избежать поломки в насосе, включается обратный клапан, который сбрасывает давление в устройстве. В данном случае, через технические отверстия внизу прибора может выйти несколько капель воды, что не является неисправностью.

## **Советы по применению:**

- Рекомендуется использовать ирригатор 1 раз в день или через день, особенно, в самом начале использования.
- Частое использование ирригатора может привести к истончению зубной эмали.
- Во избежание появления налета на внутренней поверхности резервуара, рекомендуется тщательно промывать его после каждого использования, особенно, после использования специальных средств для полоскания полости рта.

## УХОД И ОЧИСТКА

1. Перед очисткой отключите прибор от электросети.
2. Протрите корпус прибора мягкой, слегка влажной тканью.
3. Тщательно протрите прибор сухой тканью.
4. Рекомендуется промывать насадки под струей воды с мылом.
5. После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место

### **Внимание!**

- **Никогда не погружайте прибор, шнур, вилку в воду.**
- **Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки.**
- **Все манипуляции по очистке производите только с отключенным от сети прибором.**

*Примечание: Для очистки прибора и удаления бактерий заполните 20% резервуара 40%-м водным раствором медицинского спирта и кратковременно включите ирригатор так, чтобы спирт начал выходить из насадки. Выключите ирригатор и оставьте его в таком положении на 30 минут, после чего включите и прогоните через прибор чистую воду. Рекомендуется проводить данную очистку гидросистемы не реже 1-2 раза в месяц.*

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус устройства.

*Примечание: Во время хранения рекомендуется крышку резервуара для воды держать в открытом состоянии, это необходимо, чтобы не образовался неприятный запах застоявшейся воды.*

# РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ирригатор не включается	Нет подключения к электросети. В розетке нет напряжения.	Проверьте подключение к сети. Отключите и включите прибор заново, подключите прибор к другой розетке.
	Поврежден шнур электропитания.	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских.
	Неисправна розетка.	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор.
Течет вода из-под насадки	Насадка плохо установлена или установлена не до конца.	Установите насадку до щелчка пружины фиксатора.
Вода не поступает	Накопился налет в резервуаре или на внутренних поверхностях прибора.	Очистите прибор в установленном порядке настоящей инструкции.
	Возникла воздушная пробка.	При работающем ирригаторе втяните в себя воздух из насадки до поступления воды.
Не снимается насадка	Не нажата кнопка на корпусе прибора для снятия насадки.	Нажмите на кнопку фиксации насадки на корпусе прибора.
Из резервуара льется вода	Залито большое количество воды, объем не должен превышать 600 мл.	Резервуар установлен неправильно, снимите и установите заново.

*Примечание: При возникновении неисправностей, не описанных в данном разделе, или если предложенное решение не устранило проблему, рекомендуем обратиться в Сервисный Центр.*

# STARWIND

# Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверка комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильности и полноты заполнения настоящего гарантийного талона. Компания STARWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АЦЛ). Адреса и телефоны АЦЛ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: <http://starwind.com.ru/service/>; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику STARWIND. Убедительно просим Вас по избежанию недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства утрачивают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания STARWIND подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания STARWIND оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

## Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

## Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией STARWIND и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АЦЛ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

## Для всех видов изделий:

- на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
- на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
- на чехлы, ремни, шнурки для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
- для холодильников - на уплотнители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;
- для микроволновых печей - на тарелки, вертелы, решетки;
- для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.

5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.

6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
  - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователя; - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
  - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
  - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
  - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.; - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
  - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
  - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
  - действиями непреодолимой силы (стихийной, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
  - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
  - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению; - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
  - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательства.
8. Не подлежит гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лог, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
10. Компания STARWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями STARWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

## Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

## Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

## Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись



---

**Изготовитель:**

Ниппон Клик Системс Лимитед  
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,  
Тортола, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited  
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road  
Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

Изготовитель оставляет за собой право  
изменения комплектации, технических  
характеристик и внешнего вида товара.

Импортер и организация уполномоченная  
на принятие претензий от потребителей:  
ООО «Мерлион»  
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей,  
д.4

Для получения более подробной информации  
об устройстве посетите сайт:

**[www.starwind.com.ru](http://www.starwind.com.ru)**

Дата производства указана на упаковке и  
шильде устройства.

Срок гарантии: 1 год  
Срок службы: 3 года  
Срок годности: не ограничен

